

Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

Voor meer informatie over het Anchor Fast fixatiesysteem kan u terecht bij Hollister België:

☎ 010 23 04 77 - ✉ hollistercontact@hollister.com

1. Veneman W, Adams-Stubbs D. (2010) An Alternative Approach to Prevent Lip Pressure Ulcers in the Intubated Patient. Presented at The Symposium on Advanced Wound Care. 17-20 April 2010, Orlando, Florida.

Wade Veneman, RCP, RRT and Debbie Adams-Stubbs, RCP, RRT. Community Regional Medical Center, Fresno, CA USA. (2008-2010) Number of subjects: unknown, observational study of all ventilated patients from November 2008 to February 2010.

2. Miller K, Fenstermaker C, Limoge D, Leshko R, Lutz A, Morgan G, Cornman L. (2009) A Utilization of Anchor Fast Oral Endotracheal Tube Fastener to Reduce the Incidence of Lip Ulcers. Presented at The 55th International Respiratory Congress. 5-8 December 2009, San Antonio, Texas.

Kenneth Miller MEd, RRT-NPS, Chris Fenstermaker, BS, RRT-NPS, Diane Limoge CCRN, Robert Leshko BS, RRT, Angela Lutz, BS, RRT-NPS, Georgiann Morgan, Linda Cornman, BS, RRT-NPS. Lehigh Valley Health Network, Bethlehem, PA USA (2008-2009) Number of subjects: unknown, observational study of all ventilated patients from January 2008 to December 2008.

3. Garcia R, Jendresky L, Colbert L, Bailey A, Zaman M, and Majumder M. Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study. American Journal of Critical-Care. 2009. <http://www.ajcconline.org>



Hollister Belgium

Chaussée des Collines 52
1300 Wavre

☎ 010 23 04 77

✉ hollistercontact@hollister.com

Hollister en logo, en Anchor Fast zijn handelsmerken van Hollister Incorporated.
© 2011 Hollister Incorporated.

OST12N03


Een Hollister Technologie
.....

Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

De juiste keuze.

Veilig
Hygiënisch
Praktisch

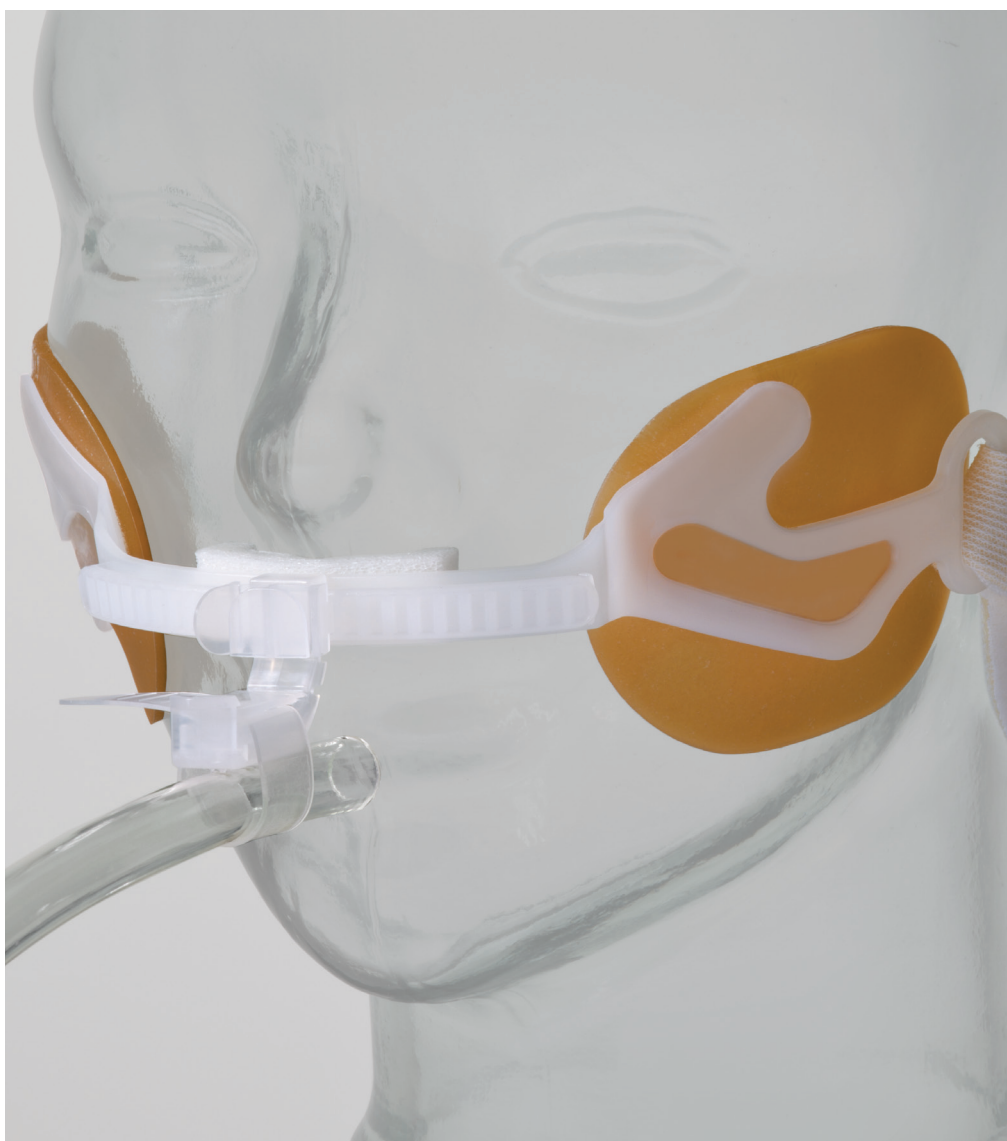

Veilig werken met endotracheale tubes.
Optimaliseren van de mondzorg.
Beschermen van de huid.

Anchor Fast

Oraal endotracheaal fixatiesysteem

Anchor Fast is een oraal endotracheaal fixatiesysteem met unieke eigenschappen. Anchor Fast helpt de vorming van lipzweren^{1,2} te voorkomen en vergemakkelijkt de toegang tot de mondholte, waardoor het bijdraagt tot een optimale mondzorg. Wetenschappelijk is vastgesteld dat het toepassen van een integraal protocol voor mondzorg en tandheelkundige zorg de kans op beademingspneumonie tijdens endotracheale intubatie vermindert.³

Eenvoudig te gebruiken

1. Plaatsen

Plaats de niet-absorberende stabilisator op de bovenlip, zodat die rust op de huid tussen neus en lip. Plaats vervolgens de huidbeschermers op de wangen.

2. Vastmaken

De tube veilig vastmaken met behulp van de zelfklevende fixatiestrook en de veiligheidsklem.

3. Instellen


Knijp op de herschuifbare vleugeltjes aanwezig aan beide zijden van het neusstuk om de sonde te verschuiven voor de mondverzorging.



Endotracheale tube met fixatiestrook



Veiligheidsklem

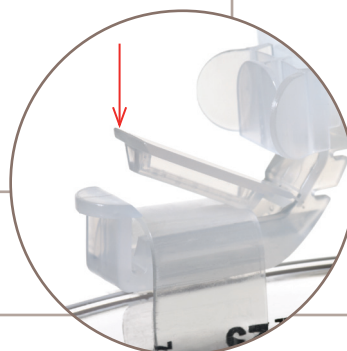

Verschuifbare tubeshuttle



Opgelet: Lees eerst de volledige gebruiksaanwijzing die bij dit product hoort, voordat u het Anchor Fast orale endotracheale fixatiesysteem gebruikt.

Het risico op beademingspneumonie verminderen dankzij geavanceerde orale en dentale zorg

In een onafhankelijke studie*, “blijkt uit de resultaten dat het gebruik van geavanceerde instrumenten in combinatie met de consequente toepassing van een integraal protocol voor mondzorg significant bijdraagt tot de vermindering van het aantal gevallen van beademingspneumonie en de daaraan verbonden kosten”³.



Producteigenschappen

- Met de verschuifbare tubeshuttle kan de endotracheale tube gemakkelijk naar beide zijden worden verplaatst, terwijl de tube veilig in de huls verankerd blijft.
- De zelfklevende fixatiestrook voorkomt ongewilde bewegingen van de tube.
- De éénkliks-veiligheidsklem bevestigt de tube. Met één klik kan de tube losgemaakt en verplaatst worden.
- De niet-absorberende stabilisator voor de bovenlip houdt de tube weg van de lippen, waardoor de druk op de mond verlicht wordt en overmatige vochtvorming, vaak de aanleiding tot huidbeschadiging, voorkomen wordt.
- De huidbeschermers houden het systeem stevig op zijn plaats. Dankzij hun samenstelling zijn de huidbeschermers huidvriendelijk, gemakkelijk te plaatsen en te verwijderen. Bovendien zijn ze vochtbestendig, wat het systeem na bevestiging stevig op zijn plaats houdt.
- De verstelbare nekband biedt extra bescherming tegen mogelijke extubatie. Kan vervangen worden.

Referentie	Omschrijving	Verpakking
9799	Anchor Fast tubefixatiesysteem	Doos van 12
9788	Anchor Fast vervangbare nekband	Doos van 4

*Fixatiesystemen voor endotracheale tubes waren geen onderwerp van de studie