

# Anchor Fast

## Fixateur pour sonde endotrachéale orale

Pour plus d'informations sur le fixateur pour sonde Anchor Fast, vous pouvez contacter Hollister Belgium:

 010 23 04 77 -  [hollistercontact@hollister.com](mailto:hollistercontact@hollister.com)

1- Veneman W, Adams-Stubbs D. (2010) An Alternative Approach to Prevent Lip Pressure Ulcers in the Intubated Patient. Presented at The Symposium on Advanced Wound Care. 17-20 April 2010, Orlando, Florida.

Wade Veneman, RCP, RRT and Debbie Adams-Stubbs, RCP, RRT. Community Regional Medical Center, Fresno, CA USA. (2008-2010) Number of subjects: unknown, observational study of all ventilated patients from November 2008 to February 2010.

2- Miller K, Fenstermaker C, Limoge D, Leshko R, Lutz A, Morgan G, Cornman L. (2009) A Utilization of Anchor Fast Oral Endotracheal Tube Fastener to Reduce the Incidence of Lip Ulcers. Presented at The 55th International Respiratory Congress. 5-8 December 2009, San Antonio, Texas.

Kenneth Miller MEd, RRT-NPS, Chris Fenstermaker, BS, RRT-NPS, Diane Limoge CCRN, Robert Leshko BS, RRT, Angela Lutz, BS, RRT-NPS, Georgiann Morgan, Linda Cornman, BS, RRT-NPS. Lehigh Valley Health Network, Bethlehem, PA USA (2008-2009) Number of subjects: unknown, observational study of all ventilated patients from January 2008 to December 2008.

3- Garcia R, Jendresky L, Colbert L, Bailey A, Zaman M, and Majumder M. Reducing Ventilator-Associated Pneumonia Through Advanced Oral-Dental Care: A 48-Month Study. American Journal of Critical-Care. 2009. <http://www.ajcconline.org>

 Hollister

### Hollister Belgium

Chaussée des Collines 52  
1300 Wavre

 010 23 04 77

 [hollistercontact@hollister.com](mailto:hollistercontact@hollister.com)

Hollister et logo, et Anchor Fast sont des marques déposées de Hollister Incorporated.  
© 2011 Hollister Incorporated.

OST12F03

La Technologie Hollister

.....

# Anchor Fast

Fixateur pour sonde endotrachéale orale

*Le bon choix.*

Sûr  
Propre  
Pratique

 Hollister



Le bon choix pour sécuriser les sondes endotrachéales.  
Le bon choix pour optimiser les soins de bouche.  
Le bon choix pour préserver l'intégrité de la peau.

# Anchor Fast

Fixateur pour sonde endotrachéale orale

Le fixateur pour sonde endotrachéale Anchor Fast possède des caractéristiques uniques. Il aide à prévenir la formation d'ulcère labial<sup>1,2</sup> et facilite l'accès à la cavité buccale permettant ainsi d'optimiser les soins de bouche.

Mettre en place un protocole complet de soin de bouche et de brossage des dents a montré que cela permettait de réduire l'incidence de la survenue de pneumonies acquises sous ventilation assistée (PAVM) durant la période d'intubation.<sup>3</sup>

## Facile à utiliser

### 1. Placer

Placer le stabilisateur non absorbant entre la lèvre supérieure et le nez. Appliquer les protecteurs cutanés sur les joues.

### 2. Sécuriser

Sécuriser le tube grâce à la bande de fixation adhésive et au clamp de sécurité.

### 3. Positionner

Pour déplacer la sonde lors des soins de bouche, pincez les ailettes de chaque côté de la navette coulissante et déplacez-la le long du guide.



Sonde endotrachéale avec bande de fixation



Clamp de sécurité




Navette coulissante



**Attention:** Lisez attentivement les conseils d'utilisation avant d'utiliser Anchor Fast, le fixateur pour sonde endotrachéale orale.

## Réduire le risque de PAVM grâce à l'optimisation des soins de bouche et au brossage de dents

Dans une étude indépendante\*, "les résultats suggèrent que l'utilisation de matériel de pointe, le respect d'un protocole complet de soins buccaux, et l'implication du personnel soignant à suivre ce protocole permet de réduire considérablement le taux de pneumonies acquises sous ventilation mécanique ainsi que les coûts y étant associés."<sup>3</sup>

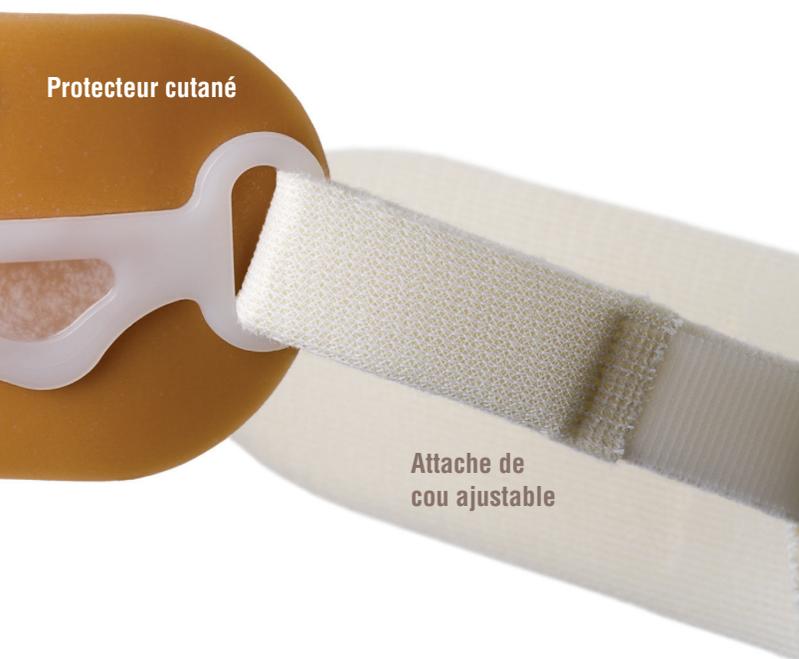

### Caractéristiques du produit

**Le guide de glissement et la navette coulissante** permettent de déplacer facilement la sonde d'un côté à l'autre de la bouche tout en assurant sa sécurité.

**La bande de fixation adhésive** aide à prévenir les mouvements involontaires de la sonde.

**Le clamp de sécurité "One clic"** maintient la sonde. Un clic libère la sonde et permet de la repositionner.

**Le stabilisateur de lèvre supérieure non absorbant** maintient la sonde à distance des lèvres, permettant ainsi d'alléger la pression sur la bouche, et de prévenir l'excès d'humidité qui peut être à l'origine de problèmes de peau.

**Les protecteurs cutanés** maintiennent fermement le système en place. La formulation des protecteurs cutanés est conçue pour respecter la peau. Ils sont faciles à poser et à retirer, leur résistance à l'humidité permet d'éviter que le système ne bouge après sa mise en place.

**L'attache de cou ajustable** constitue une sécurité supplémentaire vis-à-vis du risque d'extubation. Si besoin, elle peut être changée.

Référence	Description	Quantité
9799	Anchor Fast Fixateur pour sonde endotrachéale orale	Bte de 12
9788	Anchor Fast Attache de cou ajustable	Bte de 4

\* Les fixateurs de sonde n'étaient pas le sujet de cette étude