Mode d'emploi de la sonde VaPro Plus Pocket™




1. Rassemblez le matériel et préparez la zone.

2. Lavez-vous les mains selon les recommandations de votre soignant.

3. Placez-vous de façon à pouvoir procéder au sondage intermittent. Écartez ou retirez les vêtements pour avoir accès aux organes génitaux.


4. Ouvrez l'emballage. Pour ce faire, tirez l'orifice pour le doigt vers vous et vers le bas.




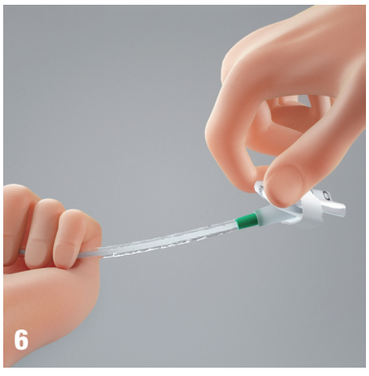

5. Laissez l'emballage sur les genoux, le lavabo ou une autre surface plane, et poser la sonde au-dessus de l'emballage.

6. Avec la poche de recueil orientée vers le haut, tenez la sonde d'une main tout en poussant la poche à l'écart de la sonde avec l'autre main afin de rompre la bande de papier. Dépliez ensuite la poche de recueil. Laissez la sonde reposer sur vos genoux, sur le lavabo ou sur toute autre surface plane.

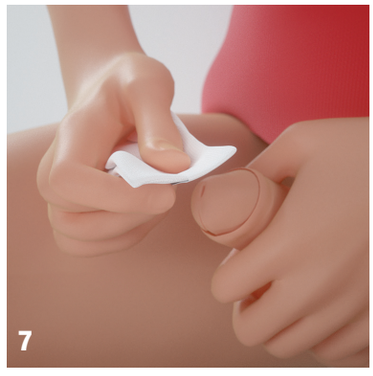

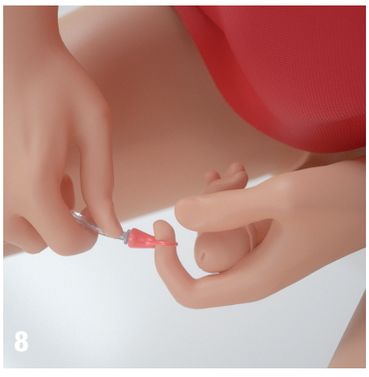

7. Tenez le pénis avec votre main non dominante et maintenez-le jusqu'à ce que vous ayez terminé de vous sonder. Décalottez (le cas échéant) et nettoyez le gland selon les recommandations et conseils fournis par le soignant.

8. Retirez le capuchon de l'embout protecteur de la sonde.

9. Tenez la sonde d'une main et, de l'autre main, faites avancer la sonde vers l'embout protecteur, en vous assurant que la sonde ne dépasse pas l'embout protecteur.

10. Saisissez la sonde en bas de l'embout protecteur.



Avec HydraBalance™ Lubricating Technology

VaPro Plus Pocket™
Sonde pour sondage intermittent No Touch

Hollister

Continence Care



11. Serrez doucement le pénis avec les doigts et l'index de votre main non dominante pour ouvrir le méat urétral. Insérez l'embout de l'introducteur dans l'urètre avec votre main dominante jusqu'à ce que la base de l'embout protecteur touche le méat urétral.

12. Le pénis maintenu étiré et en position verticale, insérez délicatement la sonde jusqu'à ce que l'urine commence à s'écouler.



13. Une fois que l'urine a cessé de couler, retirez lentement la sonde. Si l'urine recommence à couler, interrompez le retrait jusqu'à ce que le débit urinaire s'arrête. Retirez complètement la sonde lorsque vous êtes sûr que la vessie soit vide. Recalotter le prépuce (si présent).



14. Après le sondage, tenez la poche de recueil par sa poignée.

15. Pour vider la poche de recueil avant de la jeter, déchirez au niveau de la flèche (« Déchirer ici pour vider ») afin d'évacuer l'urine.

16. Jetez la sonde et l'emballage dans une poubelle. NE PAS JETER DANS LA TOILETTE.

17. Lavez-vous les mains.



AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque d'infection et/ou de complications, ne pas réutiliser la sonde.

AVERTISSEMENT : En cas d'effet indésirable ou de signe de traumatisme, arrêtez l'utilisation du produit et consultez immédiatement un médecin.

- Sonde prête à l'emploi à usage unique
- Sa gaine protectrice et son embout protecteur permettent de pratiquer la technique No Touch
- Connecteur muni d'un code couleur
- Sonde sans phtalates avec revêtement hydrophile
- 2 oeillets atraumatiques
- Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel

INDICATIONS D'UTILISATION : Cette sonde pour sondage intermittent est un tube flexible qui est inséré dans l'urètre par les patients hommes, femmes et enfants ayant besoin de vider l'urine présente dans leur vessie.

PRÉCAUTION : Consultez un médecin avant d'utiliser ce matériel si les symptômes suivants apparaissent :

- Lésion de l'urètre
- Sténose prononcée de l'urètre
- Inflammation de l'urètre (urétrite)
- Inflammation de l'épididyme (épididymite)
- Saignement inexpliqué de l'urètre
- « Fausse Route »
- Inflammation de la prostate (prostatite)

PRÉCAUTION : Le sondage doit être effectué selon les recommandations de soin et les conseils d'un médecin et uniquement conformément au mode d'emploi fourni. La fréquence de sondage (insertion d'une sonde urinaire) varie selon les personnes.

NOTE : Les boîtes doivent être rangées à température ambiante. Ne contient pas de latex de caoutchouc naturel. La sonde pour sondage intermittent n'a pas été fabriquée à partir de PVC ou de phtalates. Ce produit est composé d'une gaine en polyuréthane, d'une poche de recueil en polyéthylène et en polymère élastomérique, d'un embout et d'une tubulure en élastomère thermoplastique.

Délivré uniquement sur ordonnance.

Hollister France, Belgian Branch
0800 - 906 26
hollistercontact@hollister.com
www.hollister.be

Scannez le code QR pour visionner la vidéo d'instruction

FR

Hollister et son logos et VaPro Plus Pocket sont des marques déposées de Hollister Incorporated USA
©2026 Hollister Incorporated.

CE 0050

Hollister®