Gebruikshandleiding VaPro Plus Pocket™-katheters




1. Verzamel alle benodigdheden en leg deze klaar.

2. Was uw handen zoals voorgeschreven door uw zorgprofessional.

3. Neem een geschikte houding aan voor het uitvoeren van intermitterende katheterisatie. Maak uw kleding los of doe deze uit zodat u toegang heeft tot uw geslachtsdelen.


4. Om de verpakking te openen, trekt u de vingeropening naar u toe en naar beneden.



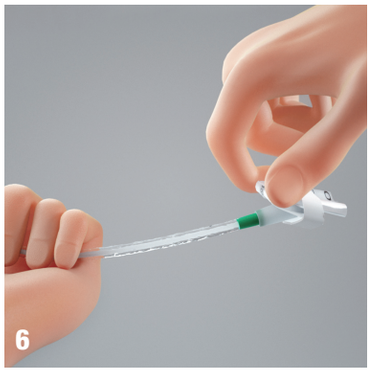


5. Haal de katheter uit de verpakking. Leg de katheterverpakking op uw schoot, wasbak of een ander vlak oppervlak. Leg de katheter bovenop de geopende verpakking.

6. Houd de katheter met één hand vast, met de opvangzak naar boven gericht, terwijl u met de andere hand de zak van de katheter af trekt om de papieren sluitstrip te verbreken. Vouw vervolgens de opvangzak open.

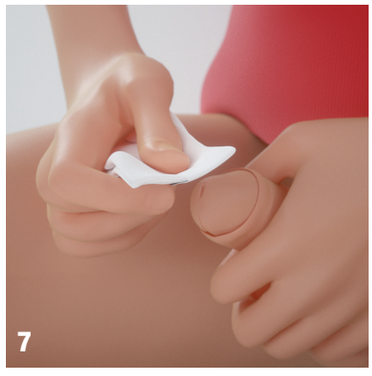


7. Houd de penis vast met uw niet-dominante hand en blijf deze vasthouden tot u klaar bent met katheteriseren. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug en reinig de eikel zoals aangeleerd door uw zorgverlener.

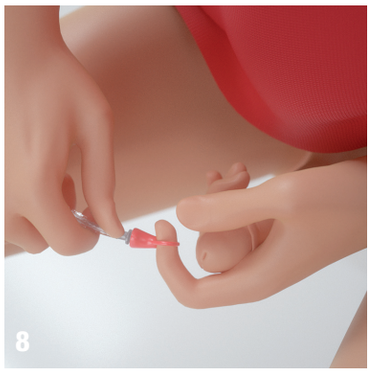

8. Verwijder het rode ringdopje van de beschermende inbrengtip.

9. Houd de katheter in de ene hand, en schuif met de andere hand de katheter tot vooraan in de beschermende inbrengtip. Zorg ervoor dat de katheter niet uit de beschermende inbrengtip steekt.

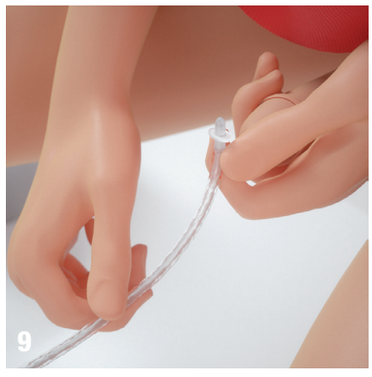

10. Neem de katheter vast onderaan de beschermende inbrengtip.

Met HydraBalance™ Lubricating Technology

VaPro Plus Pocket™
No Touch Intermitterende Katheter

Hollister

Continence Care



11. Knijp met de vingers en wijsvinger van uw niet-dominante hand zacht in de penis om de plasbuis meer te openen. Breng met uw dominante hand de beschermende inbrengtip in de plasbuis tot het bredere deel van de beschermende inbrengtip.

12. Met de penis gestrekt en rechtop gehouden, brengt u de katheter voorzichtig in totdat de urine begint te stromen.



13. Zodra de urinestroom is gestopt trekt u de katheter langzaam terug. Als de urine opnieuw gaat stromen wacht u even met terugtrekken tot de urinestroom stopt. Verwijder de katheter volledig wanneer u er zeker van bent dat de blaas leeg is. Schuif de voorhuid (indien aanwezig) terug naar voren.



14. Na het katheteriseren houdt u de opvangzak vast aan het handvat.

15. Om de opvangzak te legen voordat u deze weggooit, scheurt u bij de pijl (‘Hier scheuren om te legen’) zodat de urine kan weglopen.

16. Gooi de katheter en verpakking weg in een vuilnisbak. NIET DOOR HET TOILET SPOELEN.

17. Was uw handen.



WAARSCHUWING: Om de kans op infecties of andere complicaties te verkleinen, het product niet hergebruiken.

WAARSCHUWING: Indien men onbehaaglijk wordt of er tekenen van complicatie optreden, stopt u met het gebruik van de katheter en brengt u uw zorgverlener op de hoogte.

- Gebruiksklare intermitterende katheter voor éénmalig gebruik
- Inbrengtip en sleeve (beschermhoes). Deze zorgt er voor dat de katheter niet hoeft te worden aangeraakt
- Connector met kleur-codering
- Ftalaat-vrije katheter voorzien van een hydrofiele coating
- 2 gladde katheterogen
- Niet vervaardigd uit natuurlijk rubber latex

INDICATIES VOOR GEBRUIK: Deze intermitterende katheter is een flexibel slangvormig hulpmiddel dat door de urinebuis ingebracht wordt bij mannen, vrouwen en kinderen bij wie urine uit de blaas gehaald moet worden.

VOORZORGSMAATREGELEN: Neemt u contact op met uw zorgverlener alvorens u dit product gebruikt, wanneer een van de volgende problemen zich voordoet:

- Gevoelige plasbuis
- Uitgesproken strictuur
- Urethritis - ontsteking van de plasbuis
- Epididymitis - ontsteking van de bijbal (zaadballeider)
- Onverklaarbare bloeding uit de urinebuis
- Foutieve passage
- Prostatitis - ontsteking van de prostaat

VOORZORGSMAATREGELEN: Voor het zelf inbrengen van een katheter dient u altijd het zorgplan en advies van uw zorgverlener op te volgen, die uitsluitend mogen worden uitgevoerd in overeenstemming met de bijgeleverde instructies. Omdat de katheterisatiefrequentie van persoon tot persoon varieert, dient de aanbevolen frequentie voor uw katheterisatie door uw zorgverlener te worden aangegeven. Neem voor andere vragen over uw katheterisatie contact op met uw zorgverlener.

LET OP: Bewaar bij kamertemperatuur. Niet vervaardigd uit natuurlijk rubberlatex. Intermitterende katheter niet vervaardigd van PVC of ftalaten. Dit product bestaat uit: polyurethaan inbrenghuls, sleeve (beschermhoes), thermoplastisch elastomeer inbrengtip en slang.

Uitsluitend op voorschrift

Hollister France, Belgian Branch
0800 - 906 26
hollistercontact@hollister.com
www.hollister.be

Scan de QR code om de instructievideo te bekijken

NL

Hollister en logo en VaPro Pocket zijn handelsmerken van Hollister Incorporated, USA.
© 2026, Hollister Incorporated.

CE 0050

Hollister